

Spoločnosť Coloplast prináša produkty a služby, ktoré pomáhajú uľahčovať život ľuďom s veľmi špecifickými a intímnymi zdravotnými problémami. V úzkej spolupráci s ľuďmi, ktorí naše produkty a služby používajú, vytvárame citlivé riešenia ich špeciálnych potrieb. Voláme to intímna zdravotná starostlivosť.

Naše podnikanie zahŕňa starostlivosť o stómie, starostlivosť o kontinenciu a liečbu rán. Sme globálnou spoločnosťou, ktorá zamestnáva viac ako 10 000 ľudí v rôznych krajinách sveta.

Coloplast
Kontakt
 0800159159 BEZPLATNÁ INFOLINKA

Ostomy Care / Continnence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast a SpeediCath sú ochranné značky spoločnosti Coloplast A/S.
 © Všetky práva vyhradené Coloplast A/S, Humlebaek, Dánsko. 2019-05 www.coloplast.sk



Predstavujeme **SpeediCath® Flex**



SpeediCath® Flex

Jednoduchosť' v každom detaile

SpeediCath® Flex je nový typ mäkkého katétra s ochranným suchým rukávom a veľmi ohybným koncom. Má mnohé vlastnosti, vďaka ktorým sa katetrizácia pre Vás stáva jednoduchšou, bezpečnejšou a hygienickejšou. Katéter je navrhnutý tak, aby ľahko a bez problémov prenikal cez všetky ohyby a zákruty mužskej uretry, a to aj v prípade, že došlo k zmenám jej anatómie a priechodnosti (zväčšená prostata, striktúra, pooperačné zmeny a pod.)

SpeediCath® Flex je: **Hygienický**
Ohybný
Diskrétny

Veľkosť balenia:	10x23 cm
Dĺžka katétra:	44 cm od ohybného konca po výtokový koniec
Veľkosť priemerov:	CH 10,12,14,16
Povrch katétra:	Vylepšená technológia hydrofilného povrchu SpeediCath®
Pripojenie vrecka:	Pomocou konektora - výtokovej koncovky


Je mnoho
špeciálnych dôvodov
prečo je katetrizácia
so SpeediCath® Flex
jednoduchšia

Hygienický



Mäkká, stlačiteľná koncovka
Umožňuje ľahké a bezpečné zavedenie katétra do ústia uretry a úplnú kontrolu procesu zavádzania katétra do močového mechúra.

Suchý ochranný rukáv
Chráni vlhký hydrofilný povrch katétra s technológiou SpeediCath® pred akýmkoľvek dotykom. Znižuje riziko kontaminácie povrchu katétra baktériami na minimum a chráni tak pred vznikom infekcie močových ciest.

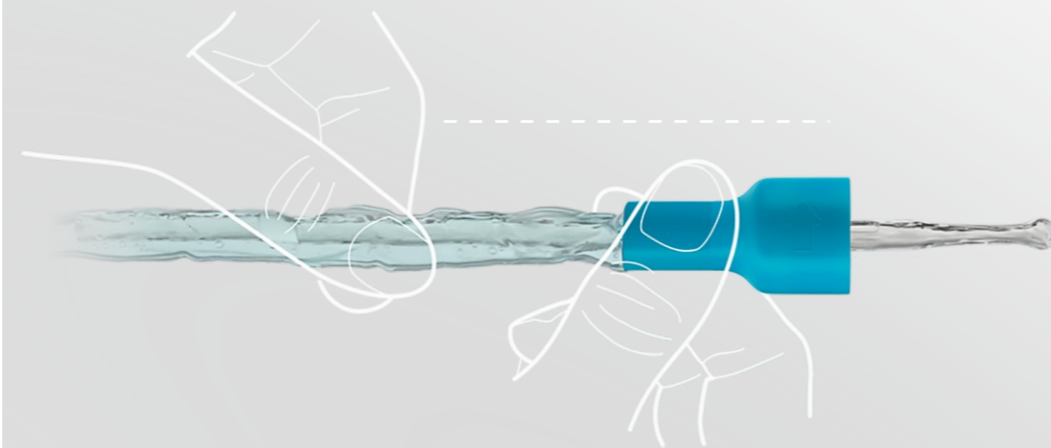


Ohybný



Ohybný koniec katétra
Mäkká guľôčka na konci katétra zabezpečuje, že pri prechode uretrou je telo katétra vždy v strede jej lúmenu. To minimalizuje tlak na steny uretry a redukuje vznik bolesti pri katetrizácii. Vysoká ohybnosť konca katétra mu umožňuje vynikajúco prekonávať všetky ohyby a zákruty mužskej uretry.

Mäkký katéter
Katéter je podstatne mäkkší, čo umožňuje ľahkú manévrovateľnosť a jemnú pasáž uretrou pri katetrizácii.

Diskrétny

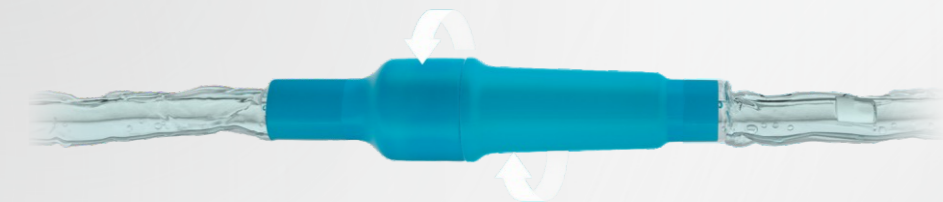

Opätovne uzatvárateľný
Po použití katétra je možné jeho mäkkú ochrannú koncovku a výtokový koniec spolu spojiť, čím vznikne uzavretý systém. Ten bráni vytečeniu zvyškového moču z dutiny katétra na ruky alebo odev užívateľa pri likvidácii použitého katétra.

Praktické balenie
Jednoduché na otváranie, v decentnom sivom prevedení vôbec nepripomína zdravotnú pomôcku. Po katetrizácii sa použitý katéter jednoducho vloží naspäť do obalu a obal sa opätovne uzavrie. Likvidácia je tak diskrétna a veľmi hygienická.

